

Instalace a konfigurace Windows a programu Praktik v DOSBoxu


DOSBox **nesmí být použit, jestliže je Praktik provozován v síti** s jiným uživatelem (sestrou, lékařem).

DOSBox je nutno použít pouze v případě jakéhokoliv „64 bit.“ operačního systému. DOS Box lze stáhnout z toho odkazu:

<http://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74/DOSBox0.74-win32-installer.exe/download>


1. Instalace DOSBoxu

Po spuštění instalace všechny kroky provedeme tlačítkem „Next“ a následně „Install“. Instalaci dokončíme tlačítkem „Close“.

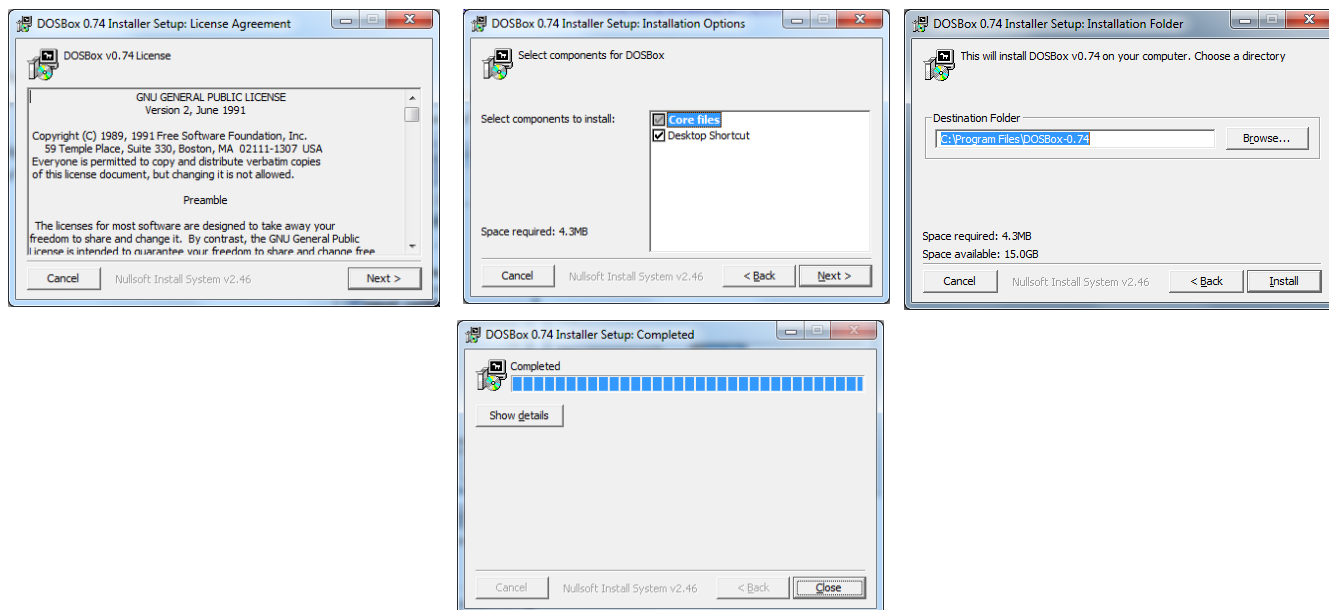

2. Nastavení DOS Boxu

Spuštění DOSBox z plochy, a v otevřeném okně zjistíte, kde leží konfigurační soubor DOSBoxu.

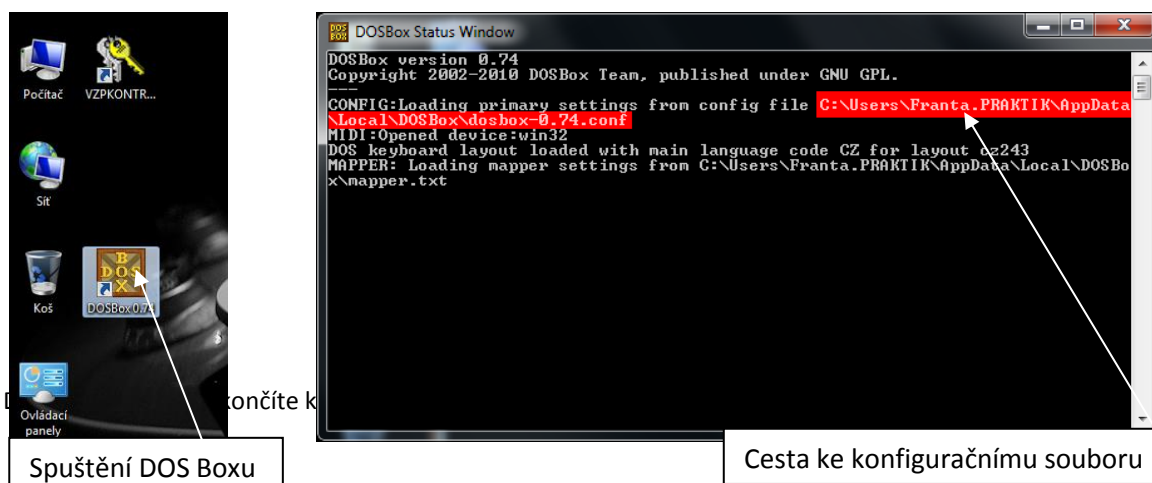


Upozornění

Kvůli správné funkčnosti Praktika v DOSBoxu (zálohování, externí moduly, ...) doporučujeme Praktika nainstalovat do **C: \Praktik4**. Název adresáře se může mírně lišit, ale nesmí být např. vnořený v dalším adresáři!

3. Další kroky nastavení DOSBoxu


- Do adresáře C:\Praktik4\ nahrát soubor numlock.exe, ke stažení je: <http://stahuj.praktik.cz/DosBox/NUMLOCK.zip>, soubor je potřeba rozbalit.
- Do adresáře s konfiguračním souborem je potřeba nakopírovat soubory mapper.txt, ke stažení: <http://stahuj.praktik.cz/DosBox/mapper.zip>, soubor je potřeba rozbalit (pomocí tohoto souboru byly smazány všechny speciální klávesy, které by kolidovaly s Praktikem).
- **Výška písma**
Řeší se ubíráním/přidáváním *Počtu zobrazených řádků* v puštěném Praktiku: **Nastavení - Počátečním nastavení Praktika** (výchozí hodnota je 25)
- **Nastavení češtiny**
Do adresáře s konfiguračním souborem je potřeba nakopírovat soubor s češtinou, který je ke stažení na: <http://stahuj.praktik.cz/DosBox/cestina.zip>, soubor je potřeba rozbalit. Dále je potřeba otevřít konfigurační soubor „dosbox-0.74.conf“ a v sekci „[dosbox]“ řádek „language=“ upravit na „language=cestina.lng“
- **Další nastavení v konfiguračním souboru**
V sekci [cpu] je potřeba řádek „cycles=auto“ upravit na „cycles=max“.
V sekci [sdl] je potřeba upravit tyto řádky:
řádek „windowresolution=original“ upravit na např. „windowresolution=1024x768“¹
dle rozlišení obrazovky
řádek „fullresolution=original“ upravit na „fullresolution=desktop“
řádek „output=surface“ upravit na např. „output=overlay“
řádek „autolock=true“ upravit na „autolock=false“ (myš pak funguje i mimo Praktik)
řádek „mapperfile=mapper-0.74.map“ upravit na „mapperfile=mapper.txt“
- **Nastavení konfiguračního souboru pro spuštění programu Praktik**
V sekci [autoexec] je potřeba dopsat tyto řádky:
mount C: C:\ - připojení disku, kde je nainstalován program Praktik
mount X: C:\Praktik4\Zpravy -t floppy - připojení komunikační složky Služby Praktika
mount L: C:\Lab -t floppy - připojení komunikační složky pro načítání laboratoří
C:\praktik4\numlock -zajistí fungování numerické klávesnice po spuštění Praktika
C:
Cd \praktik4
cls
call praktik.bat
exit
- **Ikona DOSBoxu**
Je potřeba změnit ikonu DOSBoxu na ikonu z adresáře programu Praktik a změnit název na Praktik.
- Pokud v nastavení zástupce DOSBoxu v záložce „Zástupce“ přidáte do řádku „Cíl“ parametr „-noconsole“, který způsobí, že se bude otevírat jen jedno okno a to s Praktikem.

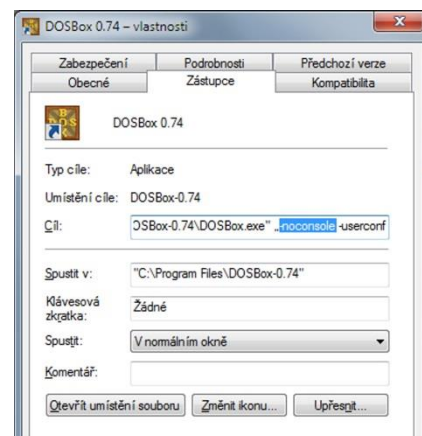

4. Nastavení v Praktiku


- **Komunikační cesta ke Službám Praktika** (zajišťují komunikaci Praktika s internetem – [účtování](#), [eRecepty](#), eNeschopenky, emaily a sms a [automatické stahování aktualizací Praktika](#))
V Praktiku je třeba nastavit, aby komunikoval přes nastavenou pravidelně aktualizovanou složku X. Po přihlášení do Praktika přejděte do **Nastavení - Počátečním nastavení Praktika**. Do pole pod „Data pro komunikační modul ukládat do:“ vepište X:\ (viz obrázek).

¹ Rozměr musí být 4:3 - 3200x2400, 2048x1536, 1600x1200, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240

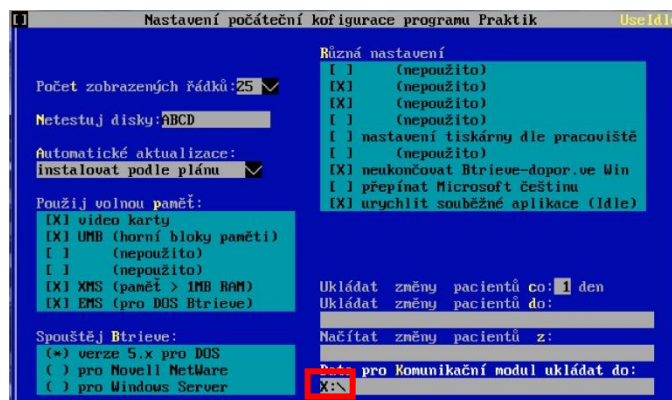


○ Automatické načítání laboratorních výsledků

- Ukládat laboratorní výsledky do připojené aktualizované komunikační složky **C:\Lab** (složka kam laboratorní program ukládá soubory s výsledky). Toto zpravidla nastavují přímo zástupci laboratoří.
- Je třeba nastavit komunikační složku pro načítání laboratoří v Praktik: Přejděte do **Pacienti**. Na seznamu pacientů zmáčkněte **F10**, vyberte **Import dat >> - Import laboratorních výsledků**. Zobrazí se Vám následující okno.

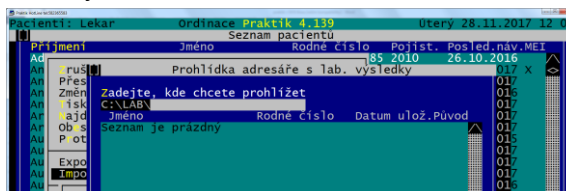


Zmáčkněte **Alt + F10**. Otevře se Vám okno **Nastavení lab. výsledků**, ve kterém je třeba do pole **Cesta k výsl.:** vepsat připojenou komunikační složku, tj. **L:**.

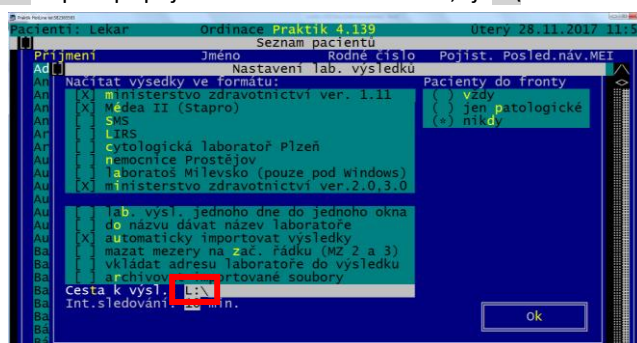


○ Nastavení zálohování na flešku

V Praktik v **Nastavení >> Počátečním nastavení**, do kolonky **Netestuj disky** napište písmena disků, které jsou obsazeny např. **cd** mechanikou, čtečkou karet (ve Windows má obsazeno více písmenek disků). Uvedené disky pak nebude Praktik prohledávat, urychlí se tak jeho práce při archivaci/obnově.

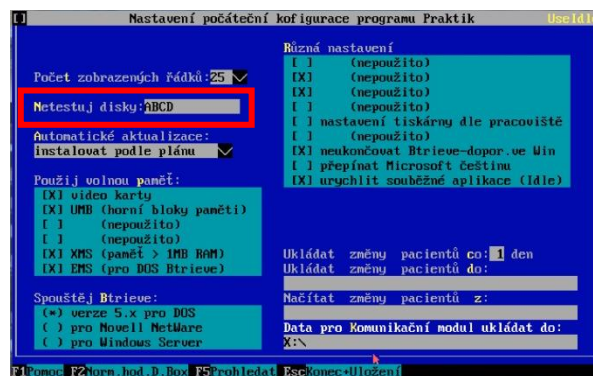

Zálohovat se musí na flešku do nějaké složky např. **ZALOHY** (složku na ní vytvořte), stejná složka musí být nastavena v archivaci v Praktik.

- při otevření okna archivace, **Alt + F10** – dostanete se do nastavení
- stiskněte **F3** – nastaví se **?:\ZALOHY** (otazník je v této chvíli místo písmenka flešky).

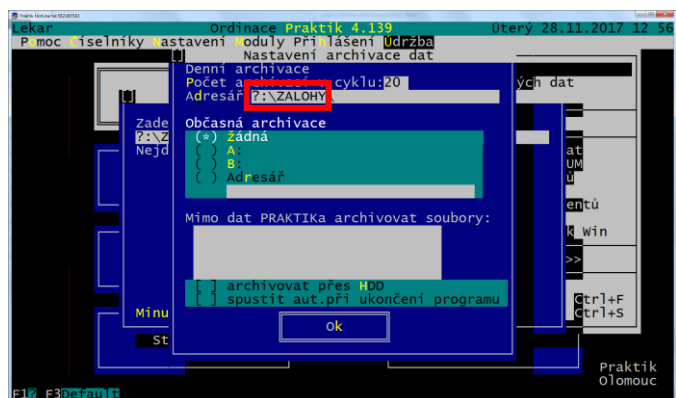

POZOR

Fleška musí být připojena dříve, než spustíte Praktik a půjdete archivovat/obnovovat, jinak ji program nenajde.

Poznámka

Při otevírání okna archivace/obnovy si Praktik najde flešku podle zmíněné složky, ale nejpíš si ji namapuje pod jiným písmenkem než ve Windows, ale to je v pořádku.